

Magnetfeldtherapie - Systeme für Mensch, Pferd und Kleintiere (wie z. B. Hund oder Katze)

Pulsierende Magnetfeldtherapie ist ein Medizinprodukt und Vertrauenssache
Unser Pulsierendes Magnetfeldtherapiesystem wird in Deutschland, nicht in Asien oder in Osteuropa hergestellt. Die Magnetfeldtherapie besteht aus vielen einzelnen Komponenten, wie z. B. einem Steuergerät, einer Therapiematte, Spulen usw.


Die Pulsierende Magnetfeldtherapie wird bei Schmerz aufgrund chronischer Krankheit, wie z. B. Schmerzen bei Arthrose, Osteoporose, Migräne oder anderer chronischer Krankheit zur Therapieunterstützung eingesetzt. Stimulation, Prävention und Therapieunterstützung stehen bei der Pulsierenden Magnetfeldtherapie im Vordergrund. Wie die Pulsierende Magnetfeldtherapie arbeitet sehen Sie in der folgenden Beschreibung auf dieser Seite.

Bei unseren Magnetfeldtherapie - Systemen handelt es sich um Medizinprodukte nach dem Medizinproduktegesetz. Aus diesem Grund unterliegen wir dem Heilmittelwerbegesetz, welches in den europäischen Ländern gültig ist.

Pulsierende Magnetfeldtherapie

Ideal zur Therapieunterstützung, Prävention und Stimulation bei vielen chronischen Krankheiten

Was sind Pulsierende Magnetfelder?

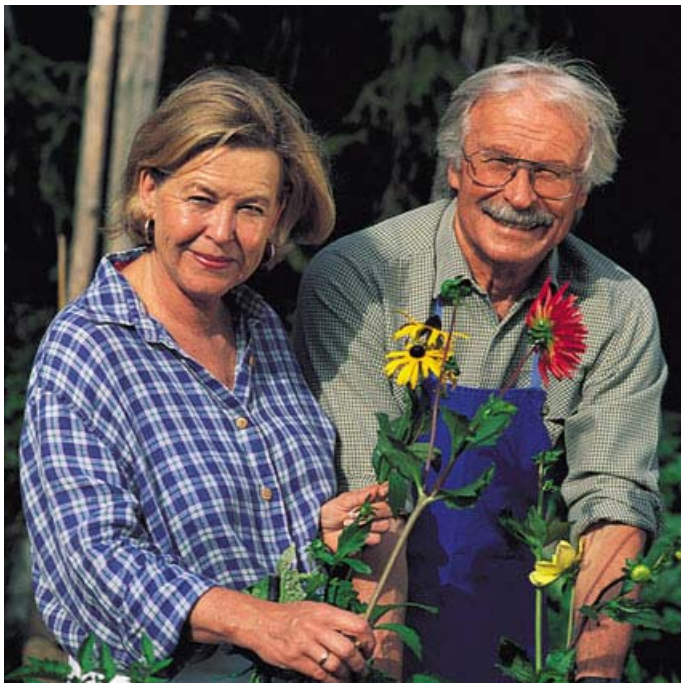

Prinzipiell kann man sagen, dass es zweierlei verschiedene Arten von Magnete gibt. Den statischen oder auch Permanentmagnet genannt und das durch Strom erzeugte Magnetfeld. Beim Permanentmagneten handelt es sich um die klassische Form, die man kennt. Eine gewisse Stärke, die in „Gauss“ ausgedrückt wird und keine Einstellmöglichkeiten. Diese Form der Magnete gab es schon im Altertum in Form von Magnetsteinen.

Viele alte Hochkulturen von den Ägyptern, Chinesen, Mayas, Griechen bis hin zu den Römern nutzten die Kraft des Magnetismus. Eingesetzt wurden Magneteisensteine und Magnetstäbe. Alte Schriften berichten von Hippokrates, im Zusammenhang mit dem "Eisen anziehenden Stein".


Im Mittelalter wird es relativ Still um die Magnetfeldtherapie, erst in der beginnenden Neuzeit beschäftigten sich die Ärzte vermehrt wieder mit dem Magnetismus. Vor allem der bekannteste Arzt dieser Zeit Paracelsus. Er arbeitete sehr viel mit dem Magneten, und machte ihn zu einem festen Bestandteil seiner Therapie.

Einen weiteren Aufschwung hat diese Therapie als sogenannter animalischer Magnetismus durch Franz Anton Mesmer erhalten. Obwohl er mit seinen sehr spektakulären Erfolgen die Magnetfeldtherapie in Europa sehr bekannt machte, schadete er ihr genauso, da er zum Einen sehr viele Neider hatte und sich zum Anderen gleichzeitig als Träger der Magnetkraft und Magnetiseur sah.


Die heutige, Pulsierende Magnetfeldtherapie hat jedoch mit den Ursprüngen dieser Therapie wenig zu tun. Gegen Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Elektrizität entdeckt, die auch die Weichen für die moderne Elektrotherapie in der Medizin stellte.

Im 19. und 20. Jahrhundert beschäftigten sich seither viele Wissenschaftler die biophysikalischen und physiologischen Wirkmechanismen der Magnetfeldtherapie zu erforschen und aufzuklären. Viele Wirkmechanismen der Magnetfeldtherapie sind inzwischen geklärt und erforscht. Allein in den letzten 30 Jahren gab es über 6000 Veröffentlichungen von medizinischen Studien. Viele dieser Studien können Sie unter <http://www.pubmed.com> (Englisch) abrufen.

Moderne Magnetfeldtherapiesysteme verfügen über ein Steuergerät mit dessen Hilfe ein Impuls an Spulen, die in einer Therapiematte positioniert sind, gesendet werden kann. Dadurch wird das Magnetfeld aufgebaut. Der Impuls wird immer wieder auf- und abgebaut. Die Steuergeräte verfügen normalerweise über unterschiedliche Programme um auf den jeweilige Problematik ideal eingehen zu können.

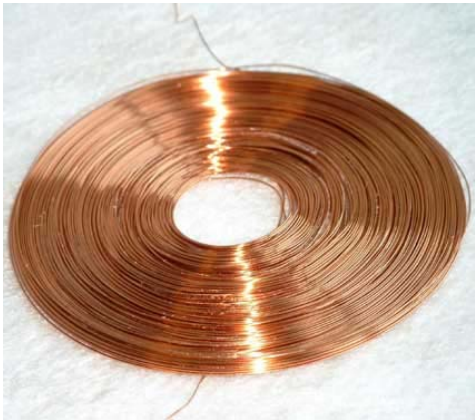

So sieht eine Spule aus. Bei der Herstellung sollte darauf geachtet werden, dass keine Fertigspulen eingesetzt werden, die aus einem kunststoffummantelten Litzendraht bestehen. Wenn man die Windungszahl (hier im Beispiel unsere Kupferspulen in unseren Therapiematten - ca. 160 Windungen) kann man den Strom reduzieren und erhält dasselbe Magnetfeld. Viele Anbieter bieten Spulen mit 10 oder 12 Windungen an, was ein mindestens 10 Mal so hohen Strom erfordert, um das gleiche Magnetfeld zu erzielen, als mit einer Spule mit derselben Feldlinienlänge und 100, bzw. 120 Windungen.

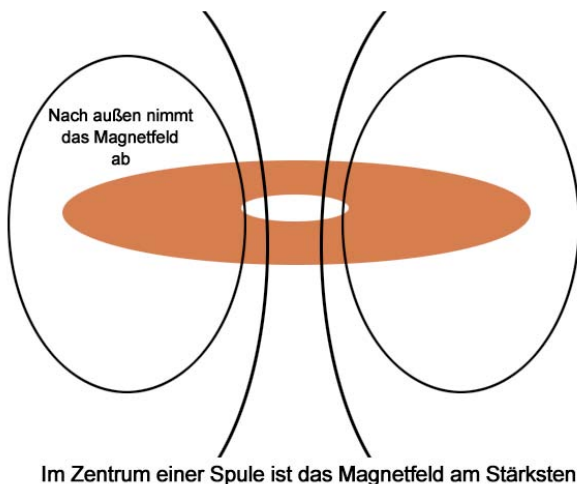

Ausserdem sollten so viel wie möglich Spulen in einer Matte untergebracht werden, um so viel wie möglich Stimulationspunkte zu erreichen. Je mehr Spulen, desto gleichmässiger das Magnetfeld auf einer Therapiematte.

Was bewirkt die Pulsierende Magnetfeldtherapie im Einzelnen?

Der Mensch besteht aus 70 - 90 Billionen Zellen. Jede einzelne Zelle stellt einen kleinen Baustein des gesamten Körpers dar. Jede Zelle hat die Aufgabe Nährstoffe und Sauerstoff zu verwerten und nach der Verwertung Schlackenstoffe, Kohlendioxid und Wasser wieder auszuscheiden.

Bei diesem Vorgang wird lebensnotwendige Energie in Form von Adenosintriphosphat (ATP) produziert.

Die Nährstoffe, der Sauerstoff und das Wasser, welche für diesen Prozess elementar wichtig sind, gelangen durch die Zellmembran in das Zellinnere. Jede Zelle hat eine elektrische Spannung (Membranpotential) von 70-90 mV. Wenn nun die Zelle ständig negativen Umwelteinflüssen wie z. B. Stress, falscher Ernährung, Elektromog, Bewegungsmangel und anderen Umweltbelastungen ausgesetzt wird, sinkt das schützende Membranpotential.

Nährstoffe und Sauerstoff gelangen nicht mehr in ausreichendem Mass in die Zelle, somit kann der oben genannte Prozess der Lebensenergiegewinnung nicht mehr vollständig funktionieren. Zusätzlich zu den bereits erwähnten Umweltbelastungen kommt oftmals noch ein nachlässiger Lebenswandel mit übermässigem Nikotin-, Koffein- und Alkoholgenuss (Vitaminräuber), der mit einem sinkenden Nährstoffangebot verbunden ist. Die Folgen hieraus sind nicht selten Schlafstörungen, Müdigkeit,

Konzentrationschwäche und Anderes. Auch Stoffwechselstörungen können hieraus resultieren, was in der Folge zu Krankheiten und einem Verlust an Lebensqualität führt. Ein sehr interessantes Buch, in diesem Zusammenhang ist "Stoffwechsel - Der Schlüssel zur Gesundheit von Prov. Dr. med. Hellmut Mehnert"



Um Ihnen dies anhand eines kleinen Beispiels nochmals näher zu erklären möchten wir eine Zelle mit einem Feuer in einem Ofen zu vergleichen. Um ein gutes Feuer zu erzeugen und es dann auch zu erhalten, wird trockenes Holz, Papier oder Ähnliches, ein Feuerzeug oder Streichhölzer und natürlich Sauerstoff benötigt. Führt man dem Feuer zu nasses Holz, oder zu wenig Sauerstoff zu, verläuft der Verbrennungsprozess schleppend, der Ofen verrusst, oder im Extremfall geht das Feuer sogar aus. Die Parallele zur Zelle liegt nachdem, was wir weiter oben beschrieben haben, deutlich auf der Hand.

Einsatz der Pulsierenden Magnetfeldtherapie



Das MAGNETOVITAL® - Magnetfeldtherapie - System kann täglich eingesetzt werden. Dadurch kann das Energiepotential der Zellen verbessert werden, wodurch die Körperfunktionen und das seelische Wohlbefinden gestärkt und verbessert werden können.

Das MAGNETOVITAL® -Magnetfeldtherapiesystem kann unterstützend eingesetzt werden zur:



- Prophylaxe
- Allgemeinen Leistungssteigerung
- Regeneration
- Aktivierung körpereigener Abwehrkräfte
- Verbesserung der Durchblutung
- Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens
- Entspannung
- Förderung eines gesunden Schlafs
- Reduktion von Stress
- Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit
- Verbesserung der Sauerstoffversorgung
- Behandlung von Verschleisserscheinungen

Über den Hersteller

Von mittlerweile über 20 Jahren in der Magnetfeldtherapie sind wir in der Lage für chronisch kranken Menschen und Tieren zu helfen, ihren Schmerz auf natürlichem Weg unterstützend zu therapieren. Wir können Sonderanfertigungen kurzfristig umzusetzen und aus dem Sortiment sofort ab Lager zu liefern.



Im Internet können Sie sich über folgenden Arbeiten erkundigen:

Medizinische Universitäts-Klinik, München, Prof. Dr. A. Struppler
Max Planck-Institut, Andechs, Prof. Dr. R. Wever <http://www.orn.mpg.de>
Helmholz-Institut für Biomedizin, Aachen, Dr. Ing. I. Syni <http://www.tik.rwth-aachen.de>
Forschungsstelle für Elektropathologie, Freiburg, Prof. Dr. R. Hauf
Universität Saarbrücken, Forschungsgruppe Altmann, Lang, Lehnair
Orthopädische Uni-Klinik, Würzburg, Prof. Dr. A. Bayerl
Universitätsklinik Tübingen Prof. Dr. Riethmüller

Interessanter Link für Arthrosepatienten

<http://www.arthrose.de>
<http://www.deutsches-arthrose-forum.de>

Interessanter Link für Rheumapatienten

<http://www.rheuma-liga.de>

Interessanter Link für Migränepatienten

<http://www.migraeneliga-deutschland.de>

Interessanter Link für Schmerzpatienten

<http://www.forum-schmerz.de>
Interessante Links für Diabetespatienten
<http://www.diabetes.de>
<http://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de>
<http://www.diabetes.uni-duesseldorf.de>

Interessante Links für Krebspatienten

<http://www.krebskompass.de>
<http://www.uni-duesseldorf.de/krebs2>

Interessanter Link für Tinnituspatienten

<http://www.tinnitus-liga.de>

Interessante Links für Pferdkrankheiten

<http://www.pferdeklinikamried.de>
<http://www.phpnicolereiber.de>

Interessante Links für Kleintierkrankungen

<http://www.thp-vehre.de>
<http://www.tiere-natuerlich-heilen.de>
<http://www.touchwell.de>

Interessanter Link für Ihre Fitness

<http://www.schwimmbadbau-saunabau.de>

Erholung im Spessart

<http://www.riebayer.de>

Wir haben die Links auf diesen Seiten geprüft, dennoch können wir leider keinerlei rechtliche Verantwortung für den Inhalt dieser Links, bzw. der darauf verweisenden Seiten oder sonstige Gewähr hierfür übernehmen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Wir weisen darauf hin, dass die pulsierende Magnetfeldtherapie in ihrer therapeutischen Wirksamkeit als "alternative Methode" bezeichnet wird.

Überzeugen Sie sich jetzt selbst von den vielen positiven Eigenschaften der Magnetfeldtherapie

Die Magnetfeldtherapie erzeugt genau definierte magnetische Impulse, welche schwach gewordene, körpereigene Prozesse unterstützen können.

Eine positiv gesteigerte Vitalität, spürbares Wohlbefinden, die mögliche Reduzierung der verschiedensten Beschwerden und die wichtige Unterstützung von gewünschten Heilungsprozessen kann die Folge sein.

Unsere MAGNETOVITAL® - Magnetfeldtherapie – Systeme, stellen die höchsten Ansprüche an Qualität und Leistung.

Die Pulsierende Magnetfeldtherapie hat heute einen ganz neuen Stellenwert bei den Therapie unterstützenden Massnahmen, weil sie nicht nur die Stimulation im Körper aktivieren kann, sondern eine ausgezeichnete Prävention darstellen kann.

Magnetfeldtherapie - Systeme für den Menschen



Magnetfeldtherapie - System 200 T

Magnetfeldtherapie - System 200 F



Magnetfeldtherapie - Manschette

Magnetfeldtherapie - Ohrapplikator

Magnetfeldtherapie - Kissen

Rückenapplikator



Baumwollmatte

Sportmatte

Magnetfeldtherapie - Liege "VARIO"

Magnetfeldtherapie - Ringe 35 und 55 cm



Transporttasche

Magnetfeldtherapie - Sessel
"Comfort"

Spezialreiniger



MAGNETOVITAL® 200 T – Magnetfeldtherapie-Komplett-System inklusive Therapiematte, Steckernetzteil und Nackenkissen

Lieferumfang: Magnetfeldtherapie Steuergerät 200 T
Therapiematte: Kunstleder 180 x 65 cm
Steckernetzteil: 12 Volt

Leistungsmerkmale:

Das Steuergerät verfügt über 15 Programme
Speziell geprüftes 12 Volt-Netzteil um immer dieselbe Leistung zu gewährleisten
Akustische und visuelle Signalisierung einer Funktionsstörung
Abschaltautomatik (Zeit einstellbar)
Abschaltsignalisierung durch Signalton
Das System ist sowohl für die Praxis, als auch für die Heimtherapie geeignet (zertifiziert nach Medizinproduktegesetz 93/42 EWG)
Die Garanzzeit beträgt 36 Monate
Sollten einmal Stromschwankungen in Ihrem Stromnetz auftreten, wird dadurch das Steuergerät nicht beschädigt, da eine Sicherung integriert ist



MAGNETOVITAL® 200 F – Magnetfeldtherapie - Komplett-System inklusive Therapiematte, Steckernetzteil und Nackenkissen

Lieferumfang: Magnetfeldtherapie Steuergerät Magnetovital 200 F
Therapiematte: Kunstleder 180 x 65 cm
Steckernetzteil: 12 Volt
Nacken- Kniekehlenkissen

Leistungsmerkmale:

Das Steuergerät verfügt über 15 Programme
Speziell geprüfetes 12 Volt-Netzteil um immer dieselbe Leistung zu gewährleisten
Akustische und visuelle Signalisierung einer Funktionsstörung
Abschaltautomatik (Zeit einstellbar)
Abschaltsignalisierung durch Signalton
Das Magnetfeldtherapie - System ist sowohl für die Praxis, als auch für die Heimtherapie geeignet (zertifiziert nach Medizinproduktegesetz 93/42 EWG)
Die Garantiezeit beträgt volle 36 Monate



MAGNETOVITAL® Ohrapplikator mit 2 Intensivspulen

Leistungsmerkmale:

zur Lokalthherapie von Ohrproblemen
Stecker zum Anschluss an Steuergerät 200 T oder 200 F
Für die Anwendung in der Praxis oder im Heimtherapiebereich geeignet (zertifiziert nach Medizinproduktegesetz 93/42 EWG)
Die Garantiezeit beträgt 36 Monate



MAGNETOVITAL® Magnetfeldtherapie-Manschette mit integrierten Spulen.

Lieferumfang: Therapiemanschette zum Anbringen am Knie oder Ellenbogen

Leistungsmerkmale:

Zur Lokalthherapie intensivere Leistung als Matte oder Liege
Stecker zum Anschluss an Steuergerät 200 T oder 200 F
Für die Anwendung in der Praxis oder im Heimtherapiebereich geeignet (zertifiziert nach Medizinproduktegesetz 93/42 EWG)
Die Garantiezeit beträgt 36 Monate



MAGNETOVITAL® Magnetfeldtherapie-Kissen mit integrierten Spulen

Lieferumfang: Therapiekissen ca. 40 x 40 cm

Leistungsmerkmale:

Zur Lokalthherapie intensivere Leistung als Matte oder Liege
Stecker zum Anschluss an Steuergerät 200 T oder 200 F
Für die Anwendung in der Praxis oder im Heimtherapiebereich geeignet (zertifiziert nach Medizinproduktegesetz 93/42 EWG)

Die Garanziezeit beträgt 36 Monate



MAGNETOVITAL® Magnetfeldtherapie-Rückenapplikator

Ausführung:

klein (Abbildung) mit 9 integrierten Spulen

gross, mit hochgezogenem Halsteil und länger am Rücken mit 13 integrierten Spulen.

Leistungsmerkmale:

zur Lokalthherapie bei Rückenproblemen

Stecker zum Anschluss an Steuergerät 200 T oder 200 F

Für die Anwendung in der Praxis oder im Heimtherapiebereich geeignet (zertifiziert nach Medizinproduktegesetz 93/42 EWG)

Die Garanziezeit beträgt 36 Monate



MAGNETOVITAL® Baumwollmatte mit integrierten Spulen

Lieferumfang: Baumwollmatte mit doppeltem Bezug und Reissverschluss 190 x 90 cm

Leistungsmerkmale:

zum Verbleib im Bett unter dem Leintuch

Stecker zum Anschluss an Steuergerät 200 T oder 200 F

Für die Anwendung in der Praxis oder im Heimtherapiebereich geeignet (zertifiziert nach Medizinproduktegesetz 93/42 EWG)

Die Garanziezeit beträgt 36 Monate



MAGNETOVITAL® Magnetfeldtherapie - Sportmatte

mit abwaschbaren Überzug, 16 Spulen, ohne Schaumstoff, so dass die Matte kleiner zusammengelegt werden kann.

Lieferumfang: Therapiematte 180 x 65 cm

Leistungsmerkmale:

zur Ganzkörper-Therapie

Stecker zum Anschluss an Steuergerät 200 T oder 200 F

Für die Anwendung in der Praxis oder im Heimtherapiebereich geeignet (zertifiziert nach Medizinproduktegesetz 93/42 EWG)

Die Garanziezeit beträgt 36 Monate



MAGNETOVITAL® Magnetfeldtherapie -Ringe

Diese Applikatoren werden in zwei verschiedenen Grössen (35 und 55 cm Innendurchmesser) gefertigt. Alle Ringe werden bei uns, um einen angenehmen Liegekomfort zu gewährleisten mit Schaumstoff und Kunstleder verkleidet. Sie sind an all unsere Steuergeräte anschliessbar.

Lieferumfang:

Therapiering ca. 35 oder 55 cm Innendurchmesser (Farbkombination nach Wahl, bzw. Farbpalette)

Leistungsmerkmale: zur Lokalthherapie, intensivere Leistung als Matte, Liege, Therapiemanschette, Kissen oder Ohrapplikator

Stecker zum Anschluss an Steuergerät 200 T oder 200 F

Für die Anwendung in der Praxis oder im Heimtherapiebereich geeignet (zertifiziert nach Medizinproduktegesetz 93/42 EWG)

Die Garanzzeit beträgt 36 Monate



Extragrosse Transporttasche - so gross, dass ein komplettes

MAGNETOVITAL® -System bequem Platz findet.



MAGNETOVITAL® COMFORT – Magnetfeldtherapie-Sessel mit

Fusshocker und integrierten Spulen

Nur noch Ausstellungsstücke erhältlich - Produkt läuft aus

Lieferumfang: Therapiesessel mit Fusshocker

Leistungsmerkmale:

Therapiesessel mit 19 Spulen

Der Fusshocker kann, um Platz zu sparen in den Sessel gelegt werden.

Stecker zum Anschluss an Steuergerät 200 F

Für die Anwendung in der Praxis oder im Heimtherapiebereich geeignet (zertifiziert nach Medizinproduktegesetz 93/42 EWG)

Die Garanzzeit beträgt 36 Monate



MAGNETOVITAL® VARIO –

Magnetfeldtherapie-Liege mit integrierten Spulen.

Auf Wunsch auch mit Massage erhältlich.

Lieferumfang: Therapieliege ca. 180 x 80 cm, Ein- oder zweiteilig, wie dies gewünscht wird

Leistungsmerkmale:

Therapieliege mit 19 Spulen

Wenn zweiteilig, kann das Fussteil in das Kopfteil gelegt werden, so dass die Liege platz sparend aufgeräumt werden kann.

Stecker zum Anschluss an Steuergerät 200 F

Für die Anwendung in der Praxis oder im Heimtherapiebereich geeignet (zertifiziert nach Medizinproduktegesetz 93/42 EWG)

Die Garanzzeit beträgt 36 Monate



Die Firma LAFER ist ein brasilianischer Traditionsbetrieb, der 1927 von Benjamin Lafer gegründet wurde. Sie hat sich auf die Produktion von formschönen und bequemen Wohnzimmeresseln spezialisiert und brachte mit ihrem Modell "Kiri" einen Sessel heraus, der es sogar zum beliebtesten Sessel weltweit gebracht hat.

Wir liefern die Sessel der Firma LAFER als reine Ruhesessel oder auf Wunsch auch mit Massage als Massagesessel und wenn Sie dies wünschen integrieren wir auch in Ihren Ruhesessel ein Magnetfeld-System zur Stimulation körpereigener Funktionen.



Optimale Sitzposition - super Optik

Bei allen Sesseln kann sowohl in der sitzenden, als auch in der liegenden Position die Fußstütze mechanisch herausgeklappt werden.

Die Position der Rückenlehne lässt sich stufenlos arretieren.

Der Kopfbereich lässt sich separat nach vorne klappen, so dass z.B. zum Fernsehen in einer halb liegenden Position der Kopf nach vorne unterstützt werden kann.



Die LAFER-Sessel zeichnen sich nicht nur durch ein sehr hohes Mass an Sitzkomfort aus, auch die Ergonomie kommt nicht zu kurz. Die Beinposition ist in der Liegeposition höher als das Becken, daher findet tatsächlich eine Entlastung statt. Ein weiterer Vorteil ist die Position der Armlehnen, die sich an der Rückenlehne orientieren. Dies bedeutet, dass die Armlehnen in der Liegeposition mit nach unten gehen. Somit haben Sie nicht das Problem, in der Liegeposition die Arme auf den oben befindlichen Armlehnen ablegen zu müssen, was auf Dauer sehr unbequem werden kann. Alle Sessel sind in vielen verschiedenen Farben lieferbar. Viele dieser Farben und Sesseltypen können Sie bei uns in der Ausstellung besichtigen.

Alle Sessel erhalten Sie mit und ohne Massage, mit und ohne Pulsierendem Magnetfeld.

Modell "KIRI"

Das Modell Kiri ist der Sessel aus dem Lafer-Sortiment, der es zum Bestseller gebracht ist.



Modell "Terri"

Terri steht für eine etwas höhere Rückenlehne und eine etwas breitere Sitzfläche im vorderen Bereich. Anstatt des Rings hat das Modell Terri einen Tellerfuss. Die Armlehnen sind komplett mit Leder überzogen.



Modell "Sir"

Das Modell Sir ist identisch zum Modell Terri, hat jedoch keinen Tellerfuss, sondern einen schwarzen Ring.



Modell "Billie"


Billie ist auf dem Modell Kiri aufgebaut, hat jedoch feststehende Armlehnen.



Modell "Thor"


Thor ist eher der rustikalere Typ, mit Holzfuss und Armlehnenansätze in derselben Holzoptik. Es steht helles und dunkles Holz zur Verfügung.



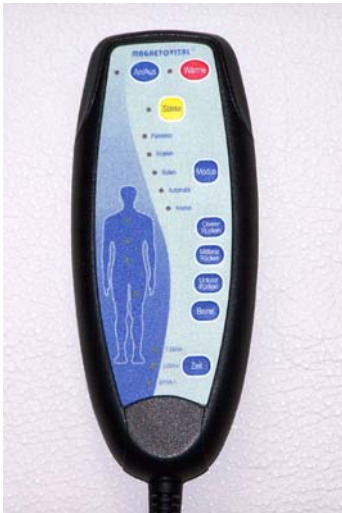

Massagefunktion

Über diese Steuereinheit haben Sie Möglichkeit unter den Funktionen Pulsieren, Rollen, Kneten und Klopfen auszuwählen. Ein Automatikprogramm führt die Massage bequem automatisch durch. An vier Positionen (oberer-, mittlerer, und unterer Rücken, sowie Beine) kann miteinander oder punktuell massiert werden. Außer der Intensität kann man auch die Zeit verstellen. Mit Hilfe der Taste Wärme lässt sich an 3 Positionen im Sessel eine leichte, angenehme Wärme erzeugen.

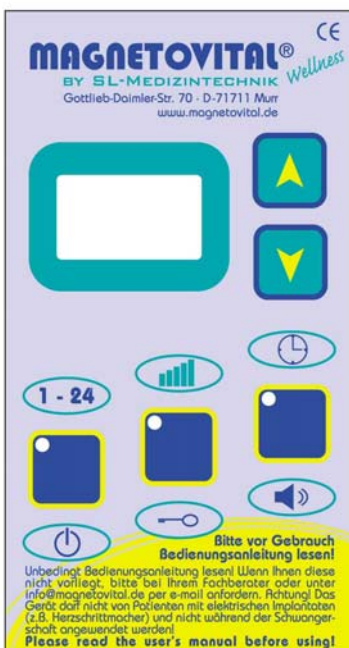

Pulsierendes Magnetfeld

Das Steuergerät MAGNETOVITAL - Wellness bietet Ihnen die Auswahl aus 24 Frequenzen (zwischen 1 und 24 Hz), eine Feldstärkenwahl von 20-100% und eine Zeitauswahl in 5 Minuten-Schritten. Ausserdem können Sie bei diesem Steuergerät die Tastatur sperren und einen Signalton, der am Ende der Anwendung zu hören ist ein-, bzw. ausschalten. Der Betrieb erfolgt über Akkus, die eine Therapie über 30 - 40 Anwendungen ermöglichen. Im Sessel sind 16 Kupferspulen eingearbeitet, die über das Steuergerät angesteuert werden.

Das Tiersystem

Für einen Tierbesitzer stellt sich zunächst die Frage was ihm bei der Therapie seines Tieres wichtig ist und für welchen Einsatzbereich das System gedacht ist und welche Tiere therapiert werden sollen.

Setze ich das System im therapeutischen Bereich als Tierarzt, Tierheilpraktiker oder -physiotherapeut ein? Wird es im Stall oder im Verein von mehreren oder nur von mir alleine genutzt? Was alles möchte ich gerne damit therapieren?

Je nach den persönlichen Bedürfnissen gestaltet sich die Zusammensetzung eines im Baukasten-System aufgebauten Therapiesystems.

Was ist das Besondere an unserem VET-System?

Thermografieaufnahmen haben ergeben, dass der Organismus von Tieren bis zu 20-mal empfindlicher auf die Magnetfeldtherapie reagiert wie der des Menschen. Aus diesem Grund erschien es uns wichtig ein Steuergerät zu entwickeln, das nicht mit festen Programmen arbeitet, sondern das einfach zu bedienen ist, und dennoch eine individuelle Einstellung für jedes Tier gewährleistet.

Unser VET 2 Steuergerät ermöglicht es, mit unserem speziell entwickelten Impuls in einer Taktfrequenz von 1 bis 24 Hz mit einer Modulationsfrequenz von 1 bis 4.000.000 Hz und einer individuellen Feldstärkenregelung von 20 bis 100% zu arbeiten. Des Weiteren ist die Zeiteinstellung in 5-Minuten-Schritten frei wählbar. Dies gewährleistet zum Einen, dass Sie auf die Sensibilität eines jeden Tieres eingehen können und gibt Ihnen ein Maximum an Flexibilität. Sehr wichtig ist auch die Tastatursperre, die gewährleistet, dass die eingestellte Intensität nicht verstellt werden kann.

Warum ist es wichtig die Frequenz und die Feldstärke frei einstellen zu können?

Nicht nur die Sensibilität, sondern auch die Grösse eines Pferdes und das Problem, welches therapiert werden soll, entscheidet über die richtige Einstellung eines Programms. Gehen wir einmal in einem Beispiel davon aus, dass Ihr Pferd ein Knochenproblem mit einer begleitenden Entzündung hat. Mit einem Steuergerät, das Ihnen z. B. 3, 5 oder 7 Programme zur Verfügung stellt, haben Sie die Möglichkeit für ein Knochenproblem z. B. Programm 3 zu wählen. Meist sind hinter solchen Programmen irgendwelche Frequenzmuster, die ständig abwechseln. Wenn Ihr Pferd nun auf eine oder mehrere Frequenzen nervös reagiert, haben Sie keine Möglichkeit dieses Tier mit diesem Steuergerät zu therapieren oder müssen trotz dieser Unruhe therapieren, was nicht besonders ratsam ist. Mit unserem Steuergerät haben Sie die Möglichkeit die Frequenz um 1 oder 2 Hz nach oben oder unten zu verändern. Außerdem können Sie sich mit der Feldstärke langsam in die Therapie "einschleichen". 216 unterschiedliche Einstellmöglichkeiten geben Ihnen und Ihrem Tier ein Maximum an Therapiekomfort.

Das VET 2 arbeitet kabellos, mit Hochleistungsakkus. Erst nach ca. 30 - 40 Anwendungen muss der Akku wieder aufgeladen werden. Dies bedeutet keine lästigen Kabel vom Steuergerät zu den Gamaschen oder zu anderen Applikatoren oder zur Steckdose. Diese Kabel sind Problemstellen, die sich vermeiden lassen. Bei unseren Geräten wurde dies berücksichtigt. Es werden keinerlei Verbindungskabel entlang dem Körper benötigt. Allerdings kann, sofern dies gewünscht wird, natürlich auch die Gamasche gemeinsam mit der Körperdecke und der Halstherapiemanschette mit einem Steuergerät betrieben werden.

Was zeichnet unsere Applikatoren aus?


All unsere Applikatoren, ausser der klassischen Kleintiermatte verfügen über einen Reissverschluss, der es ermöglicht, den Überzug zum Waschen abzunehmen. Sehr leichte Materialien ermöglichen sehr leichte Applikatoren. So wiegen z. B. unsere Körperdecken für Pferde, je nach Typ, nur zwischen 3 und 6 kg, was auch ermöglicht, dass eine nicht allzu kräftige Person die Körperdecken problemlos auflegen kann. Der Überzug kann auch mit einem nassen Lappen problemlos abgewaschen werden. In jedem Applikator sind zusätzlich ca. 150 cm Kabel. Ein Maximum an Spulen, bis zu 25 Stück in einem Applikator, gewährleisten ein möglichst gleichmäßiges Magnetfeld.

Ideen und Sonderanfertigungen

Sie haben oder suchen eine Idee, wie Sie am Besten therapieren können, weil Sie einen ganz besonderen Einsatzbereich haben oder kombiniert, z. B. Pferde und Hunde therapieren sollten? Wir haben garantiert für Sie die Lösung. Durch unsere eigene Produktion im Hause, können wir alles realisieren, was Sie wünschen.

- Nochmals in der Übersicht:
- modifizierter Sägezahnimpuls
- Frequenz- und Feldstärkenregulierung
- 216 Einstellmöglichkeiten der Intensität - individuell angepasst auf den tierischen Organismus
- einfaches Handling
- angenehmer Tragekomfort fürs Pferd durch sehr leichte Materialien (Körperdecke mit ca. 3 kg)
- keine, für das Pferd und den Anwender, störende Kabel (optional auch mit Verbindungskabel zu betreiben)
- Therapiespulen im ausreichendem Maße erzeugen ein bestmöglich, homogenes Magnetfeld über den ganzen Körper
- Alle Applikatoren sind robust, abwaschbar und zur Desinfektion geeignet, das „Innenleben“ kann mittels eines Reissverschlusses zum Waschen herausgenommen werden.
- Hochleistungsakkus für den Dauereinsatz (ca. 30 - 40 Anwendungen), Netzbetrieb ist auch möglich.
- besonders günstiges Preis-/Leistungsverhältnis durch Baukastensystem
- Einsatz in Klinik, Praxis- und Privatbereich gleichermaßen möglich
- Einsatzmöglichkeiten beim Tier zur Therapieunterstützung. Beispiele von A-Z
- Atemwegserkrankungen
- Arthrosen (wie z.B. Spat u. a.)
- Augenentzündung
- Geschwollene Beine
- Beugesehnenentzündung
- Bindehautentzündung
- Bluterguss
- Bronchialasthma, Bronchitis, Bronchospasmen

- Fesselgelenkentzündung
- Fesselträger; Zerrung
- Gelenkentzündung
- Gleichbeinentzündung
- Hautabschürfungen
- Herzerkrankungen (Unterstützung des Herz - Kreislaufsystems)
- Hufbein- und Strahlbeinbruch
- Hufrehe
- Hufrollenentzündung
- Hüftdysplasien
- Knochenbruch, Fraktur
- Knochenwachstumszone (Entzündung)
- Kreuzerschlag
- Kronengelenkschale
- Knochenhautentzündung des Rohrbeines
- Mauke
- Muskelverspannungen
- Nebenhöhlenentzündung
- Ohrenentzündung
- Piephacke
- Prellungen
- Risswunde
- Satteldruck / Gurtdruck
- Schienbeinerkrankungen / Schilddrüsenvergrößerung
- Schnittwunden
- Sehnenentzündungen
- Sohlenquetschung
- Sonnenbrand
- Sprunggelenkgalle
- Steingalle
- Stichwunden
- Stollbeule (Ellenbogenbeule, Liegebeule)
- Strahlfäule
- Tying – up
- Überbein
- Verbrennungen
- Vorderfußwurzelgelenk / Entzündung)
- Zahnfleischartschwellungen u.v.a.

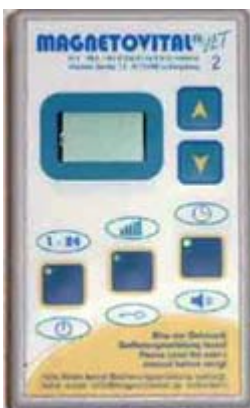

Steuergerät "VET 2"

24 verschiedene Frequenzbereiche, verschiedene Feldstärke-Intensitäten
 Timer für Abschaltautomatik (10 - 90 Minuten in 5-Minuten-Schritten einstellbar)
 Signalton, der das Ende der Therapie signalisiert (abschaltbar)
 Tastatursperre einschaltbar
 Akkubetrieb für ca. 30 bis 40 Therapien



Körperdecke "Freizeit"

Diese Körperdecke verfügt über 8 integrierte Kupferspulen im Innenleben der Decke fest integriert. Dieses Innenleben kann zum Waschen des Überzugs entnommen werden. Zu diesem Zweck verfügt diese Körperdecke über einen Reißverschluss, der es ermöglicht, den Überzug komplett zu öffnen.

Hier im Bild auch Halstherapiemanschette, Gamasche 30 cm, Gamasche 60 cm und Hinterbeingamasche zu sehen.



Körperdecke "Profi"

Diese Körperdecke verfügt über 16 integrierte Kupferspulen im Innenleben der Decke fest integriert. Dieses Innenleben kann zum Waschen des Überzugs entnommen werden. Zu diesem Zweck verfügt diese Körperdecke über einen Reißverschluss, der es ermöglicht, den Überzug komplett zu öffnen. Zum Fixieren ist zusätzlich der Befestigungsgurt mit Kunstledertasche für das Steuergerät VET 2 im Lieferumfang enthalten



Körperdecke "Champion"

Diese Körperdecke verfügt über 25 integrierte Kupferspulen im Innenleben der Decke fest integriert. Dieses Innenleben kann zum Waschen des Überzugs entnommen werden. Zu diesem Zweck verfügt diese Körperdecke über einen Reißverschluss, der es ermöglicht, den Überzug komplett zu öffnen. Zum Fixieren ist zusätzlich der Befestigungsgurt mit Kunstledertasche für das Steuergerät VET 2 im Lieferumfang enthalten. Hier im Bild auch Hinterbeingamasche und Gamasche gross zu sehen.



Halstherapiemanschette zur Lokalthherapie

Halstherapiemanschette zur Lokalthherapie. Selbstverständlich auch mit Reißverschluss zum Waschen des Überzugs, bzw. zum Herausnehmen der Spulen.



Gamasche fürs Hinterbein des Pferdes zur Lokalthherapie

Gamasche fürs Hinterbein des Pferdes zur Lokalthherapie. Selbstverständlich auch mit Reißverschluss zum Waschen des Überzugs, bzw. zum Herausnehmen der Spulen.



Gamasche gross 60 cm Länge zur Lokalthherapie

Gamasche gross 60 cm Länge zur Lokalthherapie. Selbstverständlich auch mit Reissverschluss zum Waschen des Überzugs, bzw. zum Herausnehmen der Spulen.



Gamasche 30 cm Länge zur Lokalthherapie.

Gamasche 30 cm Länge zur Lokalthherapie. Selbstverständlich auch mit Reissverschluss zum Waschen des Überzugs, bzw. zum Herausnehmen der Spulen.

Der Befestigungsgurt, dient zur zusätzlichen Fixierung der Körperdecke oder z. B. auch einer Kleintiermatte auf dem Pferderücken. Dadurch wird ein Verrutschen ausgeschlossen.



Körperdecke

Diese Körperdecke verfügt je nach Grösse (S, M, XL) über 4 - 8 Kupferspulen im Innenleben der Decke fest integriert. Dieses Innenleben kann zum Waschen des Überzugs entnommen werden. Zu diesem Zweck verfügt diese Körperdecke über einen Reissverschluss, der es ermöglicht, den Überzug komplett zu öffnen.



Kleintiertherapiematte

Kleintiertherapiematte für Hunde, Katzen oder andere Kleintiere 180 x 65 cm mit 16 Spulen. Zum Anschluss an das Steuergerät VET 2. Diese Matte produzieren wir auf Wunsch auch in nahezu jedem anderen Maß in verschiedenen Ausfertigungen. Wir bitten Sie uns Ihre Wünsche mitzuteilen.



Spezialanfertigungen

Spezialanfertigungen sind jederzeit machbar - egal ob für Kamele, Elefanten oder andere Tiere.



Günstige Komplettsysteme

Anwendungshinweise – Tipps und Tricks von A-Z

Um einen optimalen Behandlungserfolg zu gewährleisten, möchten wir Ihnen zur Anwendung der Pulsierenden Magnetfeldtherapie einige Tipps geben.

Beginn

Vor Beginn sollten Sie in jedem Fall die Kontraindikationen beachten. Ein langsamer Anfang ist empfehlenswert um sich auch langsam an diese Form der Therapie zu gewöhnen. Eine anfänglich zu lange Therapiezeit könnte zu Einschlafstörungen, Nervosität oder Unruhe führen. Blockaden könnten unter Umständen zu schnell gelöst werden. Prinzipiell ist zu sagen, dass je älter der Mensch, desto langsamer sollte man sich an die Zieldosis herantasten.

Beschwerdefreiheit

Es empfiehlt sich auch bei Beschwerdefreiheit die Magnetfeldtherapie weiter einzusetzen. Prävention bedeutet in diesem Zusammenhang optimale Zellfunktion und gute Durchblutung – und das schadet niemandem.

Empfinden

90% aller Anwender spüren direkt bei der Anwendung von derselben nichts. Im Verlaufe der Therapie kann es zu einer Sensibilisierung kommen. Es ist dann möglich, dass der eine oder andere ein Wärmegefühl oder ein Kribbeln in den Fingerspitzen feststellt. Außer diesen körperlichen Empfinden ist jedoch keine andere Reaktion zu erwarten.

Entspannung

Während der Therapie sollten Sie sich entspannen und nicht verkrampfen. Bei der Behandlung von Rückenproblemen legen Sie sich z. B. flach auf den Rücken, wobei dies nicht für die Wirkung sondern nur der Entlastung des Rückens dient, und winkeln die Füße an, so dass eine optimale Entlastung gewährleistet ist. Dies begünstigt die Therapie.

Ergebnis

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass über 90% unserer Kunden mit der Anwendung unserer Pulsierenden Magnetfeldtherapie mehr als zufrieden sind. Daher bieten wir beim Kauf unserer Systeme eine 4 Wochen Geld Zurück Garantie ! Voraussetzung für ein optimales Ergebnis ist eine regelmäßige Anwendung, wie vom Therapeuten oder dem Gerätehersteller empfohlen. Sogenannte „Therapieversager“ sind meist auf fehlende Ausdauer und der Unregelmäßigkeit bei der Therapie zurückzuführen. An dieser Stelle sei erwähnt, dass bei akuten Erkrankungen, sofern dies auch so vom Gerätehersteller, bzw. vom Therapeuten empfohlen ist, normalerweise mindestens eine Anwendung pro Tag und zur Prävention mindestens drei Anwendungen in der Woche erforderlich sind.

Erstverschlimmerungen

Etwa 3% aller Anwender erleben beim Einsatz der Pulsierenden Magnetfeldtherapie eine so genannte „Erstverschlimmerung“. Dies bedeutet, dass die Schmerzen zunächst zunehmen aber auch Hitzewallungen, Blutdruckschwankungen oder Nervosität sind möglich. Das ist zunächst kein schlechtes Zeichen! Der Körper spricht voll und ganz auf die Behandlung an und reagiert mit seiner Art auf die Therapie. Nicht selten kann man beobachten, dass diejenigen Patienten mit den heftigsten Erstverschlimmerungen die besten Behandlungserfolge erzielen. Sollten die Erstverschlimmerungen nach ca. 2-3 wöchiger Therapie (bei täglicher Behandlung) nicht verschwunden sein, sollten Sie Ihren Therapeuten oder Arzt aufsuchen, da dies keineswegs normal ist.

Kinder – Familienmitglieder

Durch die nebenwirkungsfreie Wirkungsweise ist es bedenkenlos die Magnetfeldtherapie auch und gerade bei Kindern einzusetzen. Denn es macht Sinn erst gar kein körperliches Defizit entstehen zu lassen.

Denken Sie auch an Ihre übrigen Familienmitglieder die Pulsierende Magnetfeldtherapie ist für jeden Organismus eine Therapieform nicht nur für den akuten Fall, sondern auch für die Prävention.

Kleidung

Es ist unerheblich, wie Sie bei der Anwendung der Pulsierenden Magnetfeldtherapie gekleidet sind. Das magnetische Feld durchdringt sowohl Kleider als auch den gesamten Körper. Aus diesem Grund ist es auch zu vernachlässigen, ob Sie auf Bauch oder Rücken liegen. Sie sollten die Geldbörse mit den Kreditkarten ablegen, da der magnetische Impuls zu einer Löschung des Codes auf dem Magnetstreifen der Karten führen könnte. Auch ist es sinnvoll synthetische Kleidungsstücke, sowie Schmuck abzulegen.

Medikamente

Die Magnetfeldtherapie kann die Wirkung von gleichzeitig eingenommenen Medikamenten verstärken, da diese beispielsweise durch die verbesserte Durchblutung schneller an die „Einsatzstelle“ gelangen und durch den gesteigerten Stoffwechsel besser aufgenommen werden können. Bei Anwendung der Pulsierenden Magnetfeldtherapie sollten Sie bei gleichzeitiger Einnahme von Medikamenten mit Ihrem Arzt über eine eventuelle Reduktion bzw. ein Absetzen dieser Medikamente sprechen. Wenn Sie z. B. Blut verdünnende Mittel einnehmen ist es dringend erforderlich den Arzt zu konsultieren, da durch die Pulsierende Magnetfeldtherapie das Blut bereits dünner werden kann und durch zusätzliche Einnahme von Medikamenten z. B. eine Gerinnung nicht mehr möglich wäre.

Nebenwirkungen – Sicherheit

Bislang sind der Wissenschaft keine Nebenwirkungen bei Einsatz, wie vom Hersteller beschrieben, bekannt. Wichtig ist lediglich die Beachtung der Kontraindikationen, wie z. B. das Anwendungsverbot für Patienten mit Herzschrittmacher und anderen.

Auch bei der Behandlung über einen längeren Zeitraum, was ja auch Sinn und Zweck ist (Prävention), ist diese Form der Therapiunterstützung bedenkenlos in der Anwendung.

Seriosität

Keinesfalls kann man sagen, dass automatisch ein teureres Gerät ein besseres Gerät von einem seriösen Anbieter ist. Oftmals hängen die höheren Preise mit anderen Vertriebssystemen und anderen Umständen zusammen. Heute kann man sagen, dass sinnvolle, Pulsierende Magnetfeldtherapiesysteme, die dem heutigen Standard entsprechen und sich auf dem neuesten technischen Stand befinden, bereits ab ca. € 1.300,- bis € 1.400,- erhältlich sind. Ein Bild über die Seriosität können nur Sie selber bilden. Wo sitzt der Produzent? Wie gestaltet sich ein möglicher Servicefall? Hat der Produzent einen ausreichend wissenschaftlichen Hintergrund? Handelt es sich beim Verkäufer um eine "unsichtbare" Person oder haben Sie diesen kennen gelernt? So könnte man unendlich weiter schreiben. Im Endeffekt werden Sie eine sinnvolle Entscheidung, die ein Mix aus Kosten- und Qualitätsbewusstsein mit einem Stück Patriotismus gepaart treffen, die Sie zum richtigen Weg leitet.

Trinken

Es empfiehlt sich ca. ½ Stunde vor der Anwendung der Pulsierenden Magnetfeldtherapie ½ Liter Wasser – am besten lauwarmes Leitungswasser – zu trinken. Bitte beachten Sie, dass alkoholische Getränke, Kaffee und schwarzer Tee dem Körper Flüssigkeit entziehen können und daher vor der Therapie vermieden werden soll. Mineralwasser ist bereits mit Mineralstoffen und Elektrolyten angereichert und begünstigt somit den Zellstoffwechsel (die Entgiftung) des Körpers nicht ideal. Durch das Trinken von Wasser wird die Entschlackung des Körpers (der Zellen) begünstigt. Vorsicht ist bei bestehenden Wasseransammlungen infolge von Herzerkrankungen geboten. In diesem Fall sollte der Hausarzt zu Rate gezogen werden.

Überdosierung

Prinzipiell liegen keine wissenschaftlichen Studien vor, die eine Überdosierung der Pulsierenden Magnetfeldtherapie beschreiben. Es ist jedoch empfehlenswert einen Zeitraum von einer Stunde am Tag nicht zu überschreiten. Dies ist auch absolut ausreichend um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Zunächst möchten wir darauf hinweisen, dass diese Seiten Ihnen keineswegs eine Selbstdiagnose ermöglichen und auch nicht dazu anleiten oder verleiten sollen. Auch ersetzen sie keinesfalls den Besuch beim Arzt oder Therapeuten. Sie sollen lediglich einige Zusammenhänge erklären und die Zuordnung erleichtern.

Anbei finden Sie eine ausführliche Krankheitsbeschreibung. Wir haben hier an dieser Stelle nur diejenigen Krankheiten aufgeführt, die den größten Teil der chronischen Erkrankungen darstellt.

- Arthritis
- Arthrose
- Diabetes
- Durchblutungsstörungen
- Gicht
- Migräne
- Osteoporose
- Rheuma
- Schmerzen
- Stoffwechselstörungen
- Tinnitus

Sollten Sie Fragen zur Einsatzmöglichkeit bei anderen Krankheiten haben, bitten wir Sie uns ein E-Mail oder ein Telefax zu senden. Wir werden Ihnen dann schnellstmöglich antworten.